

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA/RS

PREGÃO ELETRONICO N 116/2024

PROCESSO N°

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
24	AUTOCLAVE - OFERTAMOS - AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE AGILE PLUS 21 LITROS Modelo: AHVP-21 Autoclave horizontal digital com capacidade de 21 litros Promove a esterilização através de calor úmido com acréscimo de pressão. Opera a uma temperatura entre 121 e 127 ° C (Até 134º sob consulta na fábrica), capacidade máxima de pressão 1,5 Kgf. Gabinete com pintura epóxi eletrostática, porta em aço inox e carenagem construída em aço com pintura eletrostática, selo de segurança com pino anti vácuo, fornecendo uma maior segurança e resistência. Câmara de esterilização em aço inox 304 com espessura de 1.50 mm, medindo 268 mm x 410 mm, com capacidade para 20 envelopes no separador. Anel de vedação em silicone fixado na câmara Manipulo para abertura e fechamento da porta em aço, com rolamento facilitando o seu manuseio. Painel frontal digital, botão de despressurização com acionamento simples e leve. Na parte traseira disjuntor com chave geral, dreno para saída de água e vapor com mangueira. Pés traseiros em borracha para maior segurança. Peso liquido 32 Kg. Voltagem 127 / 220 V. Acessórios que acompanham a autoclave: 03 bandeja, 01 separador com capacidade de 13 envelopes, 01 separador com capacidade para 07 envelopes, copo Becker, mangueira para saída do vapor. Registro na Anvisa: 82306119004	1	UNID	VOLAREMED- Autoclave 21 litros Agile Plus , voltagem 127V / 220V , painel digital. COM 3 BANDEJAS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
TOTAL DA PROPOSTA : QUATRO MIL E QINHENTOS REAIS						R\$ 4.500,00

CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 65.644-5 BANCO DO BRASIL

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA – 60 DIAS

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.

DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024


QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

A empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440 , BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS , ARAPONGAS – PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/F nº 563.814.419-68 , DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024


QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006**

A empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440 , BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS , ARAPONGAS – PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/F nº 563.814.419-68., DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

- () - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
(X) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
() - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024



QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

ANEXO V

Declaração de Idoneidade

A empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440 , BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS , ARAPONGAS – PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/F nº 563.814.419-68, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024



QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

A empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440 , BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS , ARAPONGAS – PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/F nº 563.814.419-68, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024


QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE

A empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440 , BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS , ARAPONGAS – PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/F nº 563.814.419-68 , **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 116/2024, que indica o seguinte endereço eletrônico:

ATENDIMENTO@QUICKBUM.COM.BR e Telefone 43 3252-7897 para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando ainda, que se compromete com o acompanhamento diário do endereço eletrônico, providenciando a confirmação de recebimento, além de informar imediatamente a alteração do endereço indicado.

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024



QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS


A empresa QUICKBUM E-COMMERCE LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64, Endereço: RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO Nº 440 , BAIRRO JD VALE DAS PEROBAS , ARAPONGAS – PR, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) VALDIR DA SILVA COSTA , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.217.497-1 e do CPF/F nº 563.814.419-68, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 116/2024, que está ciente do regramento constante no Art. 93 da Lei 8.213/91 quanto às exigências de reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, e que não se enquadra na referida obrigação legal até a presente data.

ARAPONGAS , 20 DE AGOSTO DE 2024

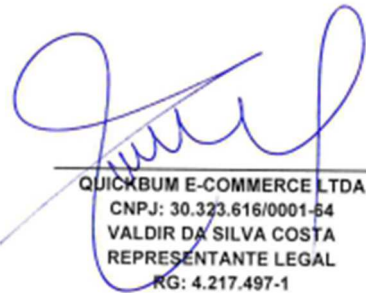
QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
CNPJ: 30.323.616/0001-64
VALDIR DA SILVA COSTA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 4.217.497-1
CPF: 563.814.419-68

MANUAL DO USUÁRIO

AUTOCLAVE HORIZONTAL
VOLARE PLUS 21
LITROS AGILE

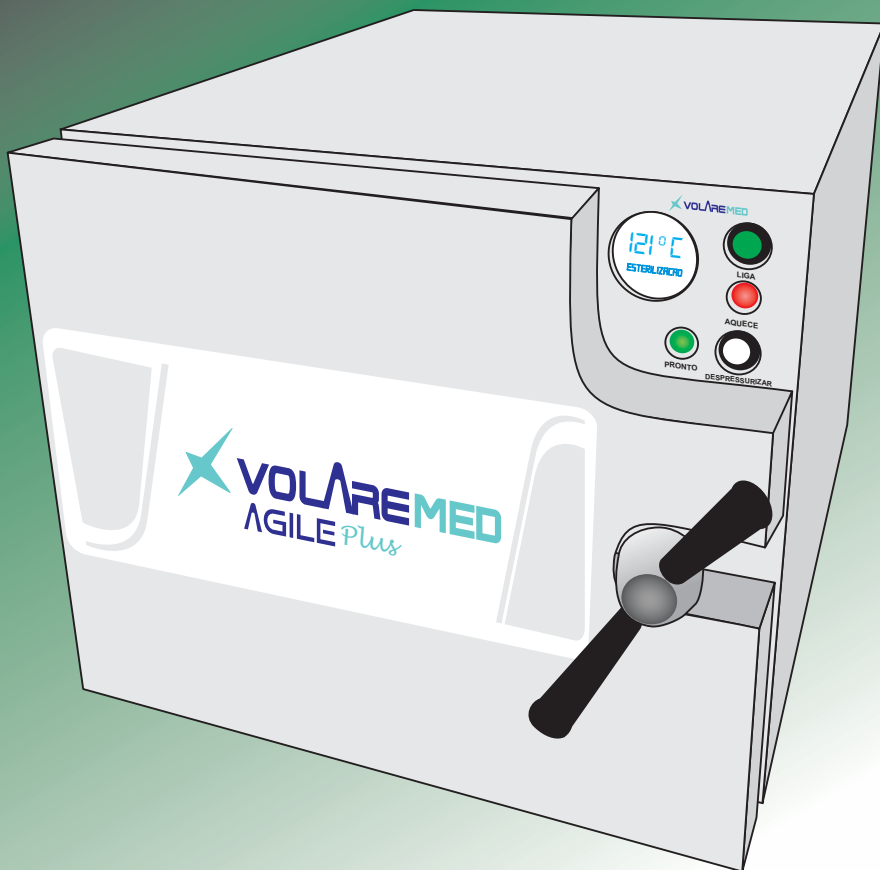

WWW.VOLAREMED.COM.BR



SUMÁRIO

CLIENTE VOLARE MED.	3
Uso destinado do Produto	4
Conferindo seu equipamento	4
INSTALAÇÃO	5
Antes de instalar	5
Instalação elétrica	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
VISÃO GERAL AUTOCLAVE HORIZ VOLARE PLUS 21 LITROS AGILE ...	7
COMO USAR A AUTOCLAVE	10
SECAGEM EXTRA	12
VERIFICAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO	13
ORGANIZANDO O MATERIAL	13
ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE	14
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	15
GARANTIA	16




CLIENTE VOLARE MED

Agradecemos a confiança em adquirir um produto Volare Med! Neste Manual você encontra todas as informações para sua segurança e uso adequado da sua autoclave. Por favor, leia este manual antes de utilizar seu equipamento e consulte-o sempre que preciso.

Em caso de qualquer dúvida entre em contato conosco:

contato@volaremed.com.br

Telefone (S.A.C.): **0800-252-1200**

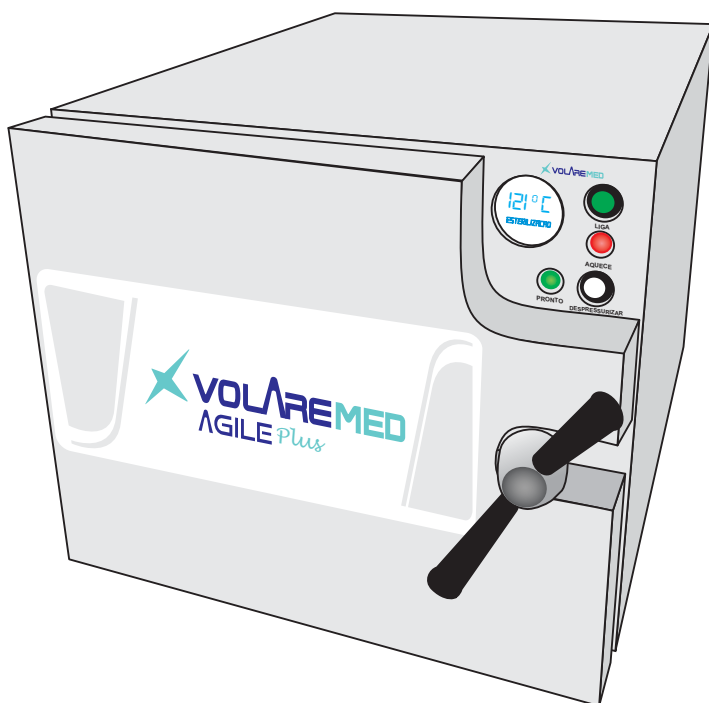

Uso destinado do produto

A **AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS 21 LITROS AGILE** promove esterilização através de calor úmido com acréscimo de pressão, para esterilização de instrumentos resistentes à pelo menos 134º C utilizados em clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, clínicas de estética, salões de beleza e laboratórios.

Este manual é exclusivo do modelo **AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS 21 LITROS AGILE**

Recomendamos que o operador tenha conhecimento em biossegurança, pois o uso indevido da autoclave poderá ocasionar danos ao local, ao operador e a terceiros, além de prejudicar o processo de esterilização.

Para uma esterilização eficaz, é de suma importância se atentar para normas de biossegurança, pois a esterilização é somente uma das etapas do processo de desinfecção e esterilização dos instrumentos.

Lembramos que é de total responsabilidade do operador usar a autoclave seguindo todas as orientações deste manual. A VolareMed não se responsabiliza por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Conferindo seu equipamento


Confira se o modelo da autoclave adquirida confere com o modelo entregue, verifique se a VOLTAGEM escolhida está correta e, em caso de alguma divergência, entre em contato com seu revendedor ou diretamente com nosso S.A.C. **0800-252-1200**

Em caso de não entendimento das informações descritas neste manual, favor entrar imediatamente em contato com o S.A.C.

INSTALAÇÃO

Não é necessária a presença de técnico especializado para instalar seu equipamento, o processo é bem simples e pode ser feito pelo próprio usuário.

Antes de Instalar

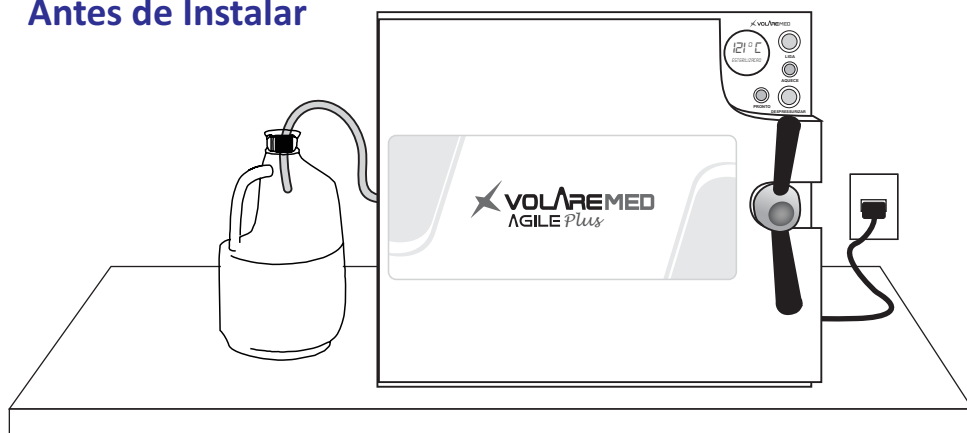

Verifique se a superfície está de acordo com as dimensões do equipamento, respeitando peso e altura, se é resistente a alta temperatura e se está corretamente nivelada. Lembramos que se trata de um equipamento que em sua base pode gerar calor. Os pés já vêm regulados de fábrica devendo ser mantidos sem alterações.

Evite locais enclausurados e fechados, mantendo uma distância de 15 cm ao redor do equipamento para circulação de ar, evitando assim problemas de aquecimento.

Instalação Elétrica



Observe a tensão do equipamento com a da rede elétrica (127V ou 220V). As ligações precisam ser feitas em uma tomada exclusiva sem oscilações na rede elétrica. Em caso de dúvida, consulte um eletricista de sua confiança para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410.

Não utilize conectores ou extensões tipo T (benjamin).
Verifique se existe na rede elétrica um disjuntor exclusivo para a autoclave, compatível com a sua potência, bem como o correto aterramento do equipamento.



NOTA: A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso contrário, a Volare Med não se responsabiliza por quaisquer possíveis danos causados à autoclave, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação ANVISA	CLASSE II
MODELO	AHVP 21
Capacidade	21 litros
Temperatura de Trabalho	121°C (+3) * sob encomenda configuração de 127°C a 134°C
Pressão Máxima	1,5 Kgf
Diâmetro da Câmara	268 mm
Profundidade da Câmara	410 mm
Altura externa	350 mm
Largura externa	392 mm
Tensão	127/220 Vca * bivolt sob encomenda
Potência	1.100 w
Corrente Nominal	127V - 8A / 220V - 5A
Frequência (Hz)	50 a 60 Hz
Peso	20 kg
Pintura	Eletrostática
Acessórios Inclusos	1 bandeja em alumínio, 1 separador em alumínio, copo medidor, passo a passo, mangueira de drenagem.
Acessórios sob Encomenda	bandejas extras em inox ou alumínio; separadores; reservatório para despressurização.

* A fábrica se reserva ao direito de atender ou não as especificações especiais feitas sob encomenda, levando em consideração a segurança e eficácia dos equipamentos fornecidos.

VISÃO GERAL DA AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS 21 LITROS AGILE


VISÃO FRONTAL PORTA FECHADA

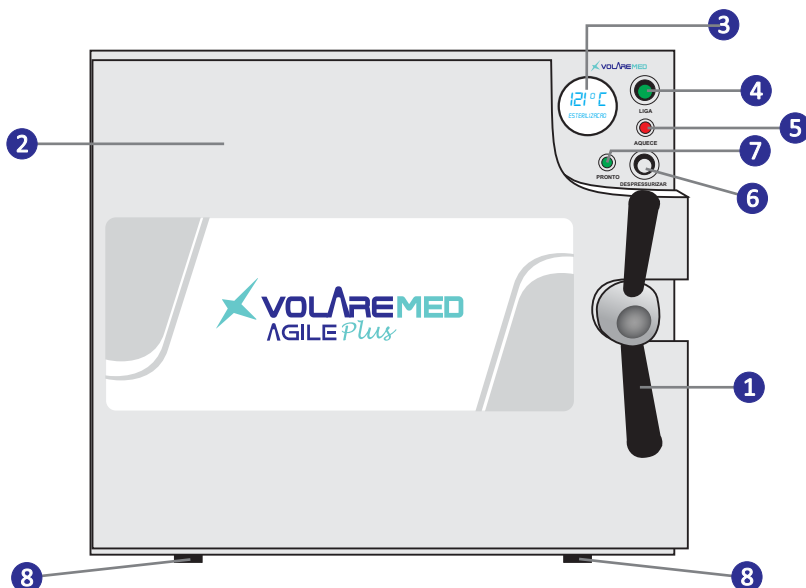

- 1** Manípulo para abertura e fechamento
- 2** Tampa Frontal
- 3** Indicador Digital da Temperatura
- 4** Botão (LIGA)
- 5** Luz Vermelha (AQUECE)
- 6** Botão (DESPRESSURIZAR)
- 7** Luz Verde (PRONTO)
- 8** Pés Dianteiros

VISÃO GERAL DA AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS 21 LITROS AGILE


VISÃO FRONTAL PORTA ABERTA

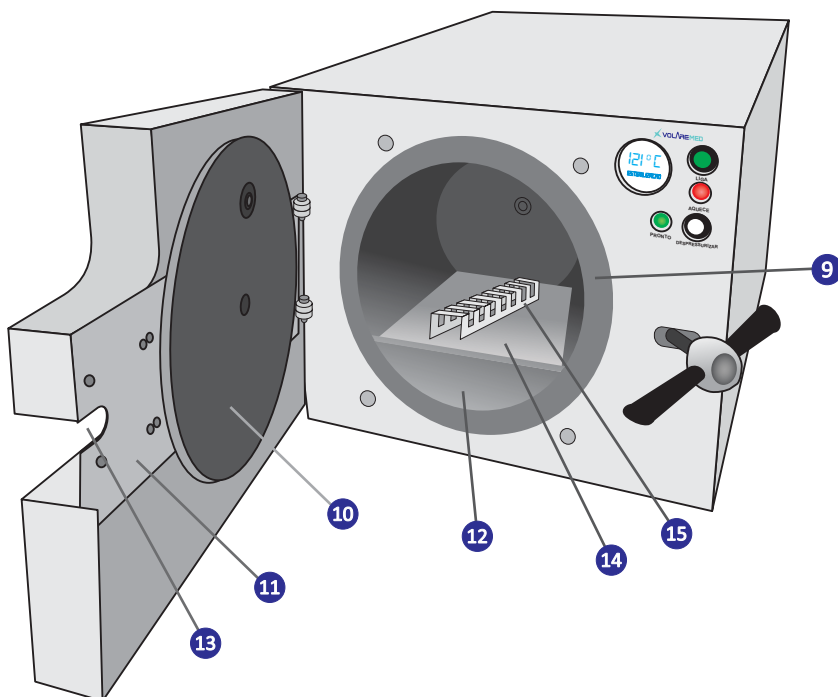

- 9 Guarnição de Silicone**
- 10 Tampa em Aço com acabamento em Inox**
- 11 Suporte da Tampa**
- 12 Câmara de Esterilização**
- 13 Engate do Manípulo**
- 14 Bandeja em Alumínio**
- 15 Separador de Envelopes em Alumínio**

VISÃO GERAL DA AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS 21 LITROS AGILE

VISTA POSTERIOR

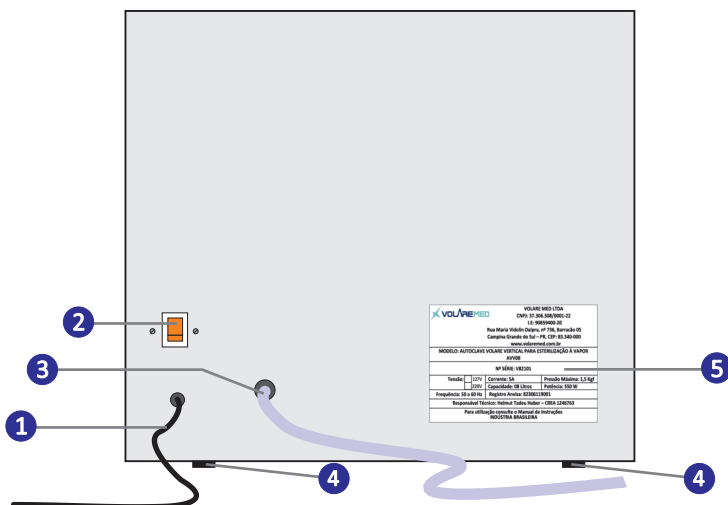


- ① Cabo de alimentação com indicação de voltagem
- ② Disjuntor - LIGA/DESLIGA
- ③ Dreno com mangueira para saída de água e vapor
- ④ Pés Traseiros
- ⑤ Rótulo de Identificação: indica o modelo do equipamento bem como o número de série.

COMO USAR A AUTOCLAVE

Para iniciar o processo de esterilização:

400 ml

- 1 Coloque **400ml** de água **DESTILADA** diretamente no interior da autoclave.

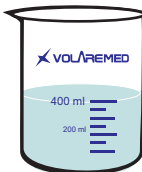


ATENÇÃO! Utilize somente **água destilada** que é livre de sais e outros minerais que comprometem a esterilização e danificam seu equipamento gerando o entupimento de tubos e válvulas.


- 2 Disponha o material a ser esterilizado nas bandejas seguindo as normas de biossegurança, de limpeza e embalagem; posicionar as embalagens para permitir a livre circulação do vapor dentro da autoclave sobre a bandeja evitando encostar o material nas laterais do interior do equipamento.

- 3 **Fechamento da tampa:**
Para um fechamento rápido e seguro, encaixe o fuso do manipulô na fenda da porta e inicie o fechamento girando o manipulô no sentido horário até alcançar o batente de fechamento.

1

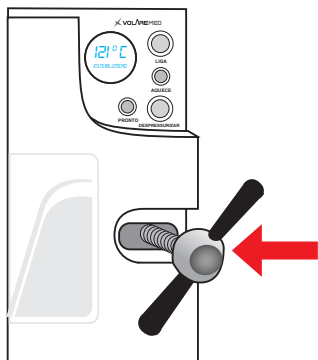

2

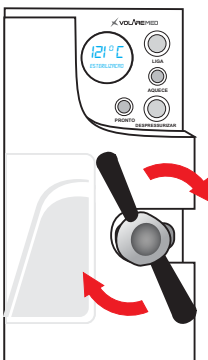

COMO USAR A AUTOCLAVE




AVISO! *É muito importante que a tampa se feche totalmente e com o encaixe ajustado, pois se trata de um equipamento com pressão e vapor aquecido, o que pode causar danos ao local, ao operador e a terceiros.*



NOTA: *Podem ocorrer pequenos vazamentos de pressão e vapor principalmente durante a pressurização inicial da autoclave, nessa fase é muito comum se formarem algumas gotas de água provenientes da tampa.*

4

Para ligar a autoclave: pressione o botão LIGA, a luz verde PRONTO apagará e a luz vermelha AQUECE acenderá dando início ao aquecimento da autoclave, ao atingir 121 C a temperatura aparece nos dígitos do painel.

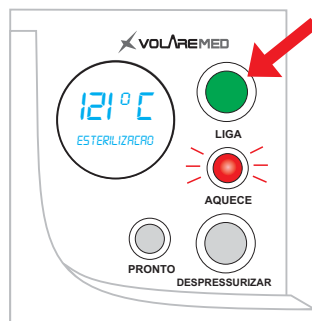


Tempo de Esterilização

A autoclave VolareMed já vem com uma quantidade de água calculada que proporciona um tempo total de esterilização em torno de 25 a 30 minutos, esse tempo pode ser alterado com o aumento e diminuição da quantidade de água utilizada, a alteração no volume de água é de total responsabilidade do operador, sendo necessária sua validação.

COMO USAR A AUTOCLAVE

- 5 Final do ciclo:** Quando a luz vermelha AQUECE e o indicador de temperatura no painel se apagarem, pressione o botão DESPRESSURIZAR no painel até esgotar o vapor (aproximadamente 1 minuto). Vapor e respingos de água serão eliminados pela mangueira instalada na parte inferior traseira da autoclave, a qual deve ser armazenada em um recipiente para ser descartado.

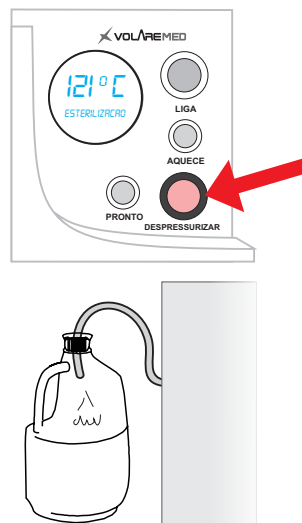

- 6 Secagem do material:** após a luz vermelha se apagar e a autoclave for despressurizada, abra a tampa da autoclave e deixe-a entreaberta para iniciar a secagem do material. Nessa etapa a autoclave deve permanecer em secagem por 10 minutos, então o material estará seco e pronto para uso e armazenagem.



AVISO! *Cuidado com as partes da superfície de metal da tampa aquecidas, caso a tampa ainda esteja presa, pressione o botão DESPRESSURIZAR novamente. Forçar a abertura da tampa poderá gerar danos ao local, ao operador e a terceiros.*

SECAGEM EXTRA

Caso ocorra do material ainda se encontrar com umidade, é recomendado pressionar o botão LIGA novamente, sem água no interior da autoclave, com a tampa entreaberta, para dar início a uma rápida secagem extra de calor.

NOVO CICLO

Para iniciar um novo ciclo de esterilização na autoclave aguarde seu resfriamento natural, e o acendimento da luz VERDE, não tente resfriar a autoclave forçadamente usando água, pois pode danificar o equipamento.

VERIFICAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO

A verificação da esterilização não é possível ser realizada a olho nu, portanto é necessária a comprovação da esterilização através de vários tipos de testes disponíveis no mercado, sendo os mais usados e comuns os indicadores químicos e os indicadores biológicos, e o seu uso varia segundo o fabricante.

Atente às instruções de uso dos indicadores em caso de dúvidas entre em contato com nosso S.A.C.: **0800-252-1200**.



AVISO! O uso da autoclave não é garantia de esterilização, por isso é indispensável o uso regular de indicadores comprovando a esterilidade dos materiais.

ORGANIZANDO O MATERIAL

Segue uma breve explanação sobre como preparar o material antes de ser esterilizado em uma autoclave:

*Observar que o material a ser esterilizado seja resistente a pelo menos **134°C**, lavar bem os materiais com sabão neutro ou apropriado para esse fim, retirando toda sujeira acumulada, após, enxaguar bem e secar. Restos de sujeira, sabão ou detergente podem causar danos nos materiais, como manchas, oxidações e até alteração de cor.*

Embarcar e acondicionar os materiais em recipientes apropriados para uso em autoclaves.

Não sobrecarregar a autoclave pois é de total importância que o vapor circule entre os materiais, garantindo assim a eficácia da esterilização. Evitar que os materiais encostem nas paredes internas da autoclave, e quando forem utilizados recipientes que possam acumular água, o mesmo deve ficar virado para baixo para evitar o acúmulo e facilitar sua secagem.

Todo processo de limpeza, secagem, embalagem e armazenamento deve ser de total conhecimento do operador da autoclave, qualquer dúvida consulte a literatura em Biossegurança para seu produto e de como esterilizar.

ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE

- O uso da autoclave requer pessoas capacitadas, e é importante o seu acompanhamento durante as fases do processo, monitorando sempre a pressão e a temperatura, e em caso de qualquer anormalidade desligar o equipamento imediatamente.
- Observar a ausência de resíduos e sujeira no interior da autoclave, pois podem causar entupimento das saídas de vapor. Não molhar as partes elétricas para evitar riscos de choque elétrico. Manter o material não resistente às altas temperatura afastado da autoclave para evitar danos ao mesmo.
- É comum a presença de odores da resistência nos primeiros usos da autoclave, também pode ocorrer de surgirem manchas no interior da câmara da autoclave ao longo de seu uso.
- Caso haja uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, o ciclo será interrompido automaticamente e todas as etapas deverão ser refeitas.
- Com o uso, é normal apresentar uma alteração na cor da câmara de esterilização, onde é posicionada a resistência.
- O dreno de saída de água e vapor deve sempre estar desobstruído, ao se despressurizar a autoclave vai se observar vapor e água saindo pela mangueira localizada na parte inferior traseira da autoclave, a mesma mangueira deve ser acondicionada em um recipiente (galão) para descarte de água.
Atenção! A mangueira não deve ficar submersa na água.
- Uma variação do tempo do ciclo da autoclave é perfeitamente normal, pois isso depende da temperatura a qual foi iniciado o ciclo. Caso ocorra o acionamento do selo de segurança, despressurize a autoclave, limpe o orifício do selo e o recoloca na posição original, sempre lembrando-se de aguardar o resfriamento do equipamento e de limpar o orifício do selo.

ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE

- A garantia de manter o produto como foi estabelecido, sem alterações, é de responsabilidade do operador e, qualquer uso fora das características descritas neste manual, não será de responsabilidade do fabricante.

CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DIARIAMENTE

Limpar a autoclave internamente com um pano ou esponja macia com água e sabão neutro. Não utilizar abrasivos, pois podem danificar o interior do equipamento.

MENSALMENTE

Limpar a guarnição de vedação e na porta pois sujeira pode ocasionar vazamento de água e fuga de pressão.

ANUALMENTE

A autoclave deverá passar por revisão completa de toda parte elétrica, conjunto de fechamento da tampa, bem como limpeza interna dos tubos e conexões.
Trocar obrigatoriamente válvula, tubo de escape, tubo de saída e demais peças que forem necessárias devido a desgaste do tempo de uso.

As peças utilizadas nas manutenções devem ser sempre originais afim de manter a integridade do equipamento. A data de compra consta na Nota Fiscal do produto e é nesta data que se inicia a contagem da garantia e da manutenção preventiva. Os custos com a manutenção preventiva é de responsabilidade do cliente e não é coberta pela garantia de fábrica.

GARANTIA

- A sua Autoclave VolareMed possui o período de 1 (um) ano de garantia, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
- Para solicitação da garantia é imprescindível a apresentação da nota fiscal do produto.
- A garantia cobre serviços de assistência técnica autorizada para substituição de peças e componentes para reparos de eventuais defeitos, devidamente comprovados como sendo de fabricação.
- A garantia de fábrica somente é válida com as manutenções preventivas em dia e realizadas por técnicos habilitados com nota fiscal que comprove a sua execução.
- A garantia não cobre custos com visitas e deslocamento de técnicos, bem como custos com o transporte do equipamento, ficando a cargo do cliente.
- Cessa a garantia para equipamentos que apresentarem qualquer tipo de alteração ou ajuste por pessoal não autorizado, bem como uso de peças não originais.
- Cessa a garantia para equipamentos que apresentarem mau uso ou ausência de manutenção preventiva.
- A fábrica não cobre custos de manuseio ou transporte inadequado do produto.
- A garantia é válida em todo território nacional.

Consulte nossa rede autorizada no site:

www.volaremed.com.br

S.A.C. 0800-252-1200

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social VOLARE MED LTDA	CNPJ 37.306.508/0001-22
Nome Fantasia	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo Rua Rio Tejo, nº 127 - Santa Terezinha CEP: 83.929-000	Cidade/UF FAZENDA RIO GRANDE/PR
Responsável Técnico HELMUT TADEU HUBER	Responsável Legal JOSIANE DREHER TABORDA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização 8.23061-1 (HH128291X7W3)	Data da Autorização 23/08/2021	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.089653/2021-11</u>	Autorização 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Embalar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Fabricar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Reembalar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	VOLARE MED LTDA
CNPJ	37.306.508/0001-22
Autorização	8.23.061-1
Produto	AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS AGILE 21L

Modelo Produto Médico
AUTOCLAVE HORIZONTAL VOLARE PLUS AGILE 21L

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	manual-usuario-agile-21-plus-rev-0.pdf	0620758236 - 19/06/2023 13:16:35

Nome Técnico	Esterilizador
Registro	82306119004
Processo	25351298234202322
Fabricante Legal	VOLARE MED LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]